



**2-teiliges
Nierengurtsystem**



- ▶ **neues Kombinationssystem, auch als Rückenstütze**
- ▶ **anatomiegerecht**
- ▶ **sommer- / wintertauglich**
- ▶ **höchster Tragekomfort**

OHRSAANA®-Nierengurtsystem bestehend aus Grundgurt und Stabilisator

Der OHRSAANA®-Grundgurt gibt Ihnen Halt in der Rückenpartie und in der Bauchmuskulatur. Die stabilen Wigonafedern sind so angeordnet, daß eine Bewegung im Hüftbereich noch möglich ist, aber der Nierenbereich trotzdem stabil geschützt wird. Erschütterungen werden minimiert. Seitliche weiche Verstärkungen schmiegen sich dem Körper an und verhindern dadurch den Eintritt von kalter Luft unter den Grundgurt. Die stufenlos einstellbaren Klettverschlüsse sind bewußt schräg angebracht und werden mittig über dem Bauch geschlossen. Die Schräge verhindert somit im Sitzen und beim Vorbeugen auf dem Motorrad das Verrutschen des Gurtes nach oben und es entsteht kein störender Druck auf die Lendenbeuge.

Durch einen äußeren Stabilisator (optional erhältlich) erweitern Sie den Grundgurt zu einer Rückenstütze. Jetzt stützt und schützt er Ihren Rücken zusätzlich bei Überbelastung durch schweres Tragen und Heben, bei bückenden Arbeiten (Garten), bei überwiegend sitzenden Büro­tätigkeiten und bei fast allen sportlichen Betätigungen.

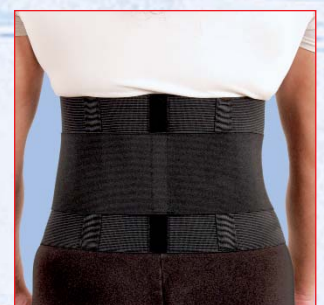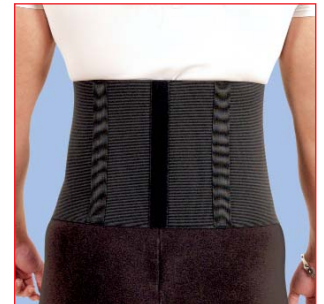

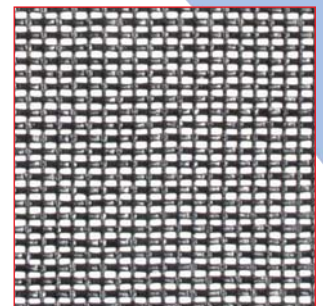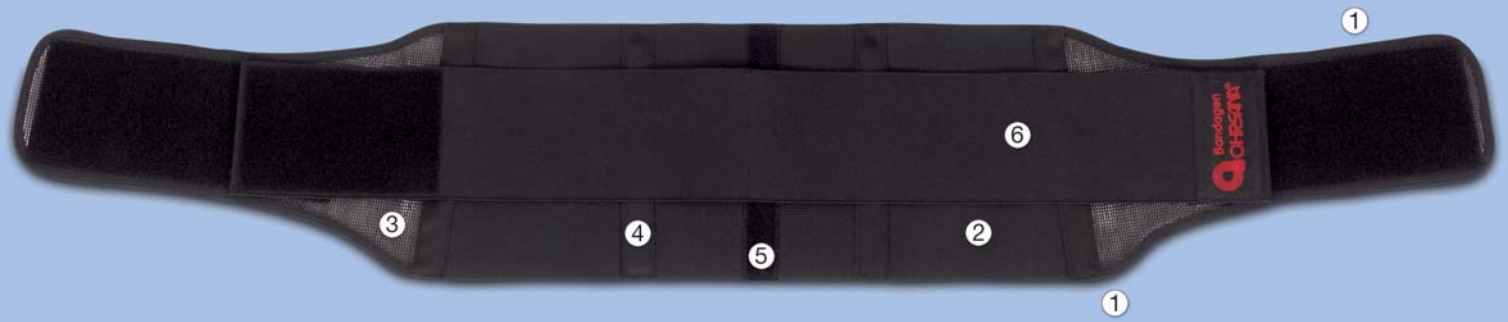

Das OHRSAANA®-Nierengurtsystem zeichnet sich durch einen sehr hohen Tragekomfort und Kombinationsmöglichkeiten aus:

1. Im Frontbereich ist der Grundgurt nur 10 cm breit und um 8° nach oben gewinkelt, um der Anatomie des Körpers gerecht zu werden. Der Winkel verhindert in der Sitzposition das Rutschen des Gurtes nach oben und es entsteht kein lästiger Druck auf die Oberschenkel.
2. Geschlossenes, elastisches Gewebe mit membranartigen Eigenschaften. Es ist wärmeerzeugend und atmungsaktiv und schützt somit den Becken- und Tailenbereich vor Kälte und Zugluft.
3. Grobmaschiges Netz zum Abführen von Feuchtigkeit.
4. Wigonafedern im Rückenteil erschweren das Beugen des Rückens, verhindern somit falsche Hebetchniken und entlasten auch im Sitzen die Rückenmuskulatur.
5. Flauschband mit Wigonafeder zur Befestigung des Stabilisators.
6. Abnehmbarer Stabilisator zur Kombination zwischen dem Sommer-Nierengurt, Winter-Nierengurt und Rückenstütze.

Das OHRSAANA®-Nierengurtsystem gibt es in 5 verschiedenen Größen:

Größen	S	M	L	XL	XXL
Tailenumfang*	70-80	80-90	90-100	100-110	110-130

* in cm, über der Kleidung gemessen

